



# Pee Cup

## User Manual

REF PUC-50

English

### HOW DOES IT WORK?

Premom Pee Cup is a sample collection tool designed to make urine collection easier for women.


### PREPARATIONS

- Ensure you have a flat surface nearby to place your cup on after collecting the sample.
- Wash hands thoroughly before collecting urine sample.
- Wash and dry the Pee Cup completely to remove all residue.

### HOW TO USE

1. Fully expand the bottom of the Pee Cup. Wash it with warm water and mild detergent before first use.
2. Thoroughly dry the cup and hold it by the handle.



3. Position the pee cup to collect your urine until it is about half full. Remove the cup and finish urinating into the toilet.

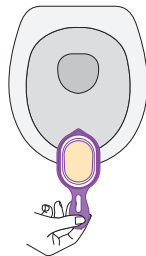

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Use the Pee Cup only for its intended purpose of collecting urine samples. Do not use it for eating, drinking, or any other purpose.
- Do not share the Pee Cup for safety and hygienic reasons.
- Do not use the Pee Cup if it arrives damaged or becomes damaged in any way.
- Keep the Pee Cup out of reach of children; it is not a toy.
- Pee can naturally stain or discolor the Pee Cup over time.
- DO NOT place the Pee Cup in dishwasher.

### PRODUCT COMPONENT

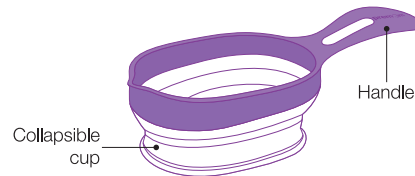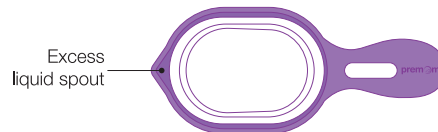

### CONTENTS

- Pee Cup(s)
- User Manual

### MEANING OF SYMBOLS ON PACKAGE



Keep away from sunlight



Manufacturer



Store between 4°C - 30°C (39°F - 86°F)



Catalog#



Date of manufacture



Keep dry



Lot number



Recyclable



Consult instruction for use

### QUESTIONS OR COMMENTS?

Distributed by: **Easy Healthcare Holdco India Private Limited**  
Suite 302, 3rd Floor Trinity Complex, 5AC, 512 5th A Cross, 2nd Block HRBR Layout, KalyanNagar, Bengaluru, Karnataka 560043

Email: [support@premom.com](mailto:support@premom.com)  
To learn more, please visit us at

[www.premom.in](http://www.premom.in)

Made in China



Scan the code to get the manual in more languages

# मूत्र कप

## उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

REF PUC-50

हिन्दी

### यह कैसे काम करता है?


Premom मूत्र कप एक नमूना संग्रह उपकरण है जिसे महिलाओं के लिए मूत्र संग्रह को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

### तैयारियाँ

- सुनिश्चित करें कि नमूना एकत्र करने के बाद कप रखने के लिए पास में एक समतल सतह हो।
- मूत्र का नमूना एकत्र करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें।
- सभी अवशेष हटाने के लिए मूत्र कप को धोकर पूरी तरह सुखा लें।

### उपयोग कैसे करें


1. मूत्र कप के तले को पूरी तरह फैलाएं। पहले उपयोग से पहले इसे गुनगुने पानी और हल्के डिटर्जेंट से धो लें।
2. कप को पूरी तरह सुखाएं और इसे हैंडल से पकड़ें।
3. मूत्र इकट्ठा करने के लिए मूत्र कप को सही स्थिति में रखें जब तक कि यह आधा न भर जाए। कप को हटा दें और शेष मूत्र को टॉयलेट में त्याग दें।

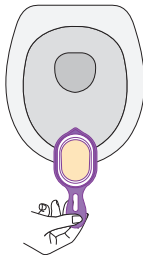

### चेतावनियाँ और सावधानियाँ

- मूत्र कप का उपयोग केवल मूत्र के नमूने एकत्र करने के उद्देश्य के लिए करें। इसका उपयोग खाने, पीने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए न करें।
- सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी कारणों से मूत्र कप को साझा न करें।
- यदि मूत्र कप क्षतिग्रस्त हालत में मिलता है या उसे कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो उसका उपयोग न करें।
- मूत्र कप को बच्चों की पहुँच से दूर रखें; यह एक खिलौना नहीं है।
- समय के साथ, मूत्र स्वाभाविक रूप से मूत्र कप को दागदार या रंगहीन कर सकता है।
- मूत्र कप को डिशवॉशर में न डालें।

### उत्पाद के घटक

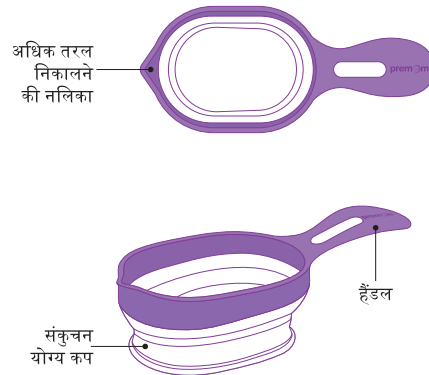

### घटक

- मूत्र कप
- उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

### पैकेज पर प्रतीकों का अर्थ



धूप से दूर रखें



निर्माता



4°C-30°C (39°F-86°F) के बीच संग्रहित करें



कैटलॉग #



निर्माण की तारीख



सुखा रखें



लॉट नंबर



पुनर्नवीनीकरण योग्य



उपयोग के निर्देशों से परामर्श करें

### प्रश्न या टिप्पणी?

वितरक (distributor): ईज़ी हेल्थकेयर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड  
सुइट 302, 3rd फ्लोर ट्रिनिटी कॉम्प्लेक्स, 5AC, 512 5थ A क्रॉस, 2nd ब्लॉक  
HRBR लेआउट, कल्याण नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका 560043

ईमेल: [support@premom.com](mailto:support@premom.com)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट

[www.premom.in](http://www.premom.in) पर जाएं।



Huiyilong Mold Co., Ltd  
No. 3, Xinhe South Road, Baishui Village, Yongning Street,  
Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong Province, China

चीन में निर्मित



मैन्युअल को और भाषाओं में प्राप्त करने के लिए कोड स्कैन करें